


Prefert®

Vaginal Gel ved ufrivillig barnløshed
Emätungeeli raskautta suunnitteleville
Vaginalgel ved ønske om å få barn
Vaginalgel vid önskan att bli gravid

Medintim

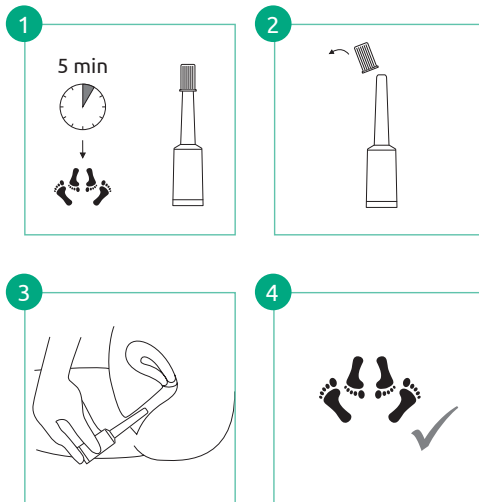

Anvendelsesinstruktioner skal læses før brug!
Lue käyttöohjeet ennen käyttöä!
Les bruksinstruktionen før bruk!
Läs användaranvisningarna före användning!



Dansk

Prefert® Vaginal Gel ved ufrivillig barnløshed

Virkemåde:

Prefert® Vaginal Gel skaber et miljø, hvor sædceller kan bevæge sig optimalt hen til ægget.

Des osmotiske egenskaber giver en optimal bevægelsesfrihed. Det fremmer sædcellernes bevægelighed og er en ideel hjælp for sædcellen til at finde frem til ægget.

Med en neutral pH-værdi på 7,2 beskytter Prefert sædcellerne mod et for surt miljø og sikrer således, at de overlever.

Prefert® Vaginal Gel forbedrer sædcellernes bevægelighed, sammenlignet med de klassiske, vandopløselige glide midler.

Tidspunkt for anvendelse:

Til midlertidig anvendelse på de tre mest frugtbare dage i den kvindelige cyklus (tidspunktet for ægløsning).

Må kun anvendes én gang indenfor 24 timer.

Indholdsstoffer:

Højrenset vand, natriumchlorid, natriumphosphat, kaliumphosphat, arabingalactan, hydroxyethylcellulose, polyhexanid.

Anvendelse:

Indføres 5 minutter inden samlejet.

1. Tag inden samlejet en engangs-applikator Prefert® Vaginal Gel ud af emballagen

2. Fjern lukkehætten.

3. Før vaginalapplikatoren ind i skeden. Tryk applikatoren sammen for at kunne indføre gelen. Fjern applikatoren.

4. Nu kan du have samleje. Pakkens indhold er beregnet til 8 anvendelser.

Efter brug bortskaffes den tomme applikator i husholdningsaffaldet.

Indeholder ikke paraben.

Vigtige informationer:

Såfremt du har irritationer ved brug af Prefert® Vaginal Gel, må gelen ikke anvendes længere, og du bedes kontakte din læge.

Skal opbevares utilgængeligt for børn.

Benyt ikke Prefert® Vaginal Gel, hvis du for nylig har fået foretaget et indgreb i skeden eller har en skedeinfektion.



Suomi

Prefert®-emätungeeli raskautta suunnitteleville

Toimintatapa:

Vie sisään 5 minuuttia ennen ympäristön, joka edistää siittiöiden pääsyä munasolun luo.

Osmoottisten ominaisuuksiensa ansiosta geeli luo ihanteelliset liikkumisolosuhteet. Geeli tukee siittiöiden liikkuvuutta ja on ihanteellinen apu niiden saattamiseksi munasolun luo.

Neutraalin pH-arvonsa (7,2) myötä Prefert suojaa siittiöitä liian happamalta ympäristöltä ja varmistaa siten niiden elossa pysymisen.

Prefert®-emätungeeli parantaa siittiöiden liikkuvuutta perinteisiin vesipohjaisiin liukasteisiin verrattuna.

Käyttöaika:

Tilapäiseen käyttöön kuukautiskierron kolmena hedelmällisimpänä päivänä (ovulaation kohtalla).

Käytä vain kerran 24 tunnin aikana.

Valmistusaineet:

Puhdistettu vesi, natriumkloridi, natriumfosfaatti, kaliumfosfaatti, arabinogalaktani, hydroksietyyliselluloosa, polyheksanidi.

Käyttö:

Vie sisään 5 minuuttia ennen sukupuoliyhdyntää.

1. Ota ennen yhdyntää yksi Prefert®-emätungeelin kertakäyttöasetin pakkauksesta.

2. Poista korkki.

3. Vie asetin emättimeen. Purista asetinta, jotta geeli siirtyy emättimeen. Vedä asetin ulos.

4. Yhdyntään voi nyt aloittaa. Pakkaus riittää 8 käyttökertaan.

Hävitä tyhjä asetin käytön jälkeen talousjätteen mukana. Ei sisällä parabeneja.

Huomaa:

Jos Prefert®-emätungeelin käytön yhteydessä ilmenee ärsytystä, lopeta käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Älä käytä Prefert®-emätungeeliä, jos sinulle on vastikään tehty emättimen alueen toimenpide tai sinulla on emätininfektio.



Prefert® vaginalgel ved ønske om å få barn

Virkning:

Prefert® vaginalgel skaper et miljø der det er optimalt for spermcellene å bevege seg til eggcellen.

De osmotiske egenskapene tilbyr en optimal bevegelsesklaring. Dette fremmer bevegelsen til spermcellene og er en ideell hjelp for en vellykket vei til eggcellen.

Med en nøytral pH-verdi på 7,2 beskytter Prefert vaginalgel mot et for surt miljø og sikrer dermed at de overlever.

Prefert® vaginalgel forbedrer bevegelsen til spermcellene i sammenligning med klassiske, vannløselige glidemidler.

Brukstid:

Til midlertidig bruk ved de tre mest fruktbare dagene i menstruasjonssyklusen (tidspunktet for eggøsningen).

Brukes kun én gang i løpet av 24 timer.

Innholdstoffer:

Renset vann, natriumklorid, natriumfosfat, kalium, fosfat, arabinogalaktan, hydroksyetylcellulose, polyheksanid

Bruk:

Føres inn 5 minutter før samleie.

1. Før samleie ta en engangs-applikator med Prefert® vaginalgel ut av pakningen.
2. Fjern lukkeheten.
3. Før vaginalapplikatoren inn i skjeden. Trykk sammen applikatoren for å føre inn gelen. Fjern applikatoren.
4. Nå kan du ha samleie.

Pakningsinnholdet er tilstrekkelig til 8 anvendelser.

Etter bruk kastes den tomme applikatoren i husholdningsavfallet.

Fri for parabener.

Merknader

Hvis du får utslett ved bruk av Prefert® vaginalgel, avslutt bruken og forhør deg med lege.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke bruk Prefert® vaginalgel hvis du nylig har hatt et vaginalt inngrep eller har en akutt vaginal infeksjon.

Prefert® vaginalgel vid önskan att bli gravid

Verkningsmekanism:

Prefert® vaginalgel skapar en miljö i vilken spermerna kan röra sig optimalt mot ägget. Dess osmotiska egenskaper ger ett optimalt rörelserum. Detta främjar spermernas rörlighet och hjälper dem att hitta till ägget.

Prefert har ett neutralt pH-värde på 7,2 som skyddar spermerna från en för sur miljö och säkerställer deras överlevnad.

Prefert® vaginalgel ökar spermernas rörlighet jämfört med vanliga, vattenlösliga glidmedel.

Användningstid:

För tillfällig användning de tre mest fertila dagarna i menstruationscykeln (vid ägglossning).

Används bara en gång under 24 timmar.

Innehållsämen:

Renat vatten, natriumklorid, natriumfosfat, kaliumfosfat, arabinogalaktan, hydroxietylcellulosa, polyhexanid

Användning:

Appliseras 5 minuter före samlaget.

1. Ta ut en engångsapplikator med Prefert® vaginalgel ur förpackningen.
2. Ta av locket.
3. För in vaginalapplikatorn i slidan. Tryck ihop applikatorn för att föra in gelen. Ta ut applikatorn.
4. Nu kan du ha samlag.

Förpackningens innehåll räcker för 8 användningar.

Kasta den tomma applikatorn i hushållsoporna efter användning.

Fri från parabener.

Anm.:

Om du blir irriterad vid användningen av Prefert® vaginalgel, sluta använda den samma och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd inte Prefert® vaginalgel om du nyligen har genomgått ett vaginalt inngrep eller har en akut vaginal infektion.



Holdbarhed efter åbning: 3 måneder. | Säilyä 3 kuukautta avaamisesta | Holdbar i 3 måneder etter åpning | Hållbar 3 månader efter öppnandet



Må ikke genanvendes. | Ei saa käyttää uudelleen | Ikke til gjenbruk | Får inte återanvändas.



Affald | Jäte | Avfall | Avfall



Opbevares tørt | Suojattava kosteudelta | Beskyttes mot fuktighet | Förvaras torrt



Temperaturbegrensning | Lämpötilarajat | Temperaturbegrensning | Temperaturgräns



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

www.medintim.de



Made in Germany



Gel Prefert8



11.11.2019

Prefert® Vaginal Gel

Free of
silicones,
parabens &
mineral
oils

Medicinsk produkt til hjemmebrug under ægløsningen ved ønsket om at få børn

Lääkinnällinen valmiste raskautta suunnitteleville – kotikäyttöön ovulaation yhteydessä

Medisinprodukt til hjemmebrug under eggøsning ved ønske om å få barn

Medicinteknisk produkt för hemmabruk under ägglossningen vid önskan att bli gravid

www.prefert.com

Medintim