

English

Please read this leaflet carefully before use.

YES VM

YES VM water-based organic Vaginal Moisturising gel uses a patented technology to provide natural, long-lasting moisture to dry vaginal mucosa.

YES VM is available in 100ml tubes and packs of pre-filled applicators.

- When menopausal estrogen depletion causes itching, burning and irritation of the dry vaginal tissues, YES VM gives effective, fast and long-lasting relief, and restores intimate comfort.
- YES VM uses bio-adhesive plant polymers which adhere to the vaginal walls and provide prolonged hydration for up to 3 days.
- Case studies show that YES VM is fast-acting and long-lasting while replenishing intimate moisture safely and naturally.

Provides symptomatic relief from:

- Vaginal dryness
- Menopausal Vaginal Atrophy
- Itching
- Irritation, burning and soreness
- Dyspareunia.

Temporary vaginal dryness can have various origins: after childbirth, when breastfeeding, and when taking oral contraceptives. Certain anti-depressants and anti-histamines can cause intimate dryness, as can extreme stress.

YES VM is:

- A soft, clear bio-adhesive gel
- Discreet no smell, taste, colour, stickiness or fallout. Close to the texture and feel of a woman's own lubrication
- pH matched to restore and stabilise the protective acidity of the intimate environment, supporting vaginal health
- Hormone-free
- Free from known mucosal irritants, and ingredients such as glycerine, petroleum products, parabens (hormone mimics) which can disrupt or compromise intimate health
- Gentle and natural, for even the most sensitive conditions
- Guaranteed purity through its certified organic status
- Safe for use with latex and polyisoprene condoms
- Trusted by Health Care Professionals and women to bring soothing, safe and welcome relief to the debilitating symptoms of menopausal dryness
- A non-hormonal natural alternative to synthetic chemical intimate moisturisers.

When cancer treatment (surgery or chemotherapy) has resulted in vaginal dryness, YES VM is safe for hormone sensitive conditions, and successfully moisturises delicate or traumatised intimate tissues. YES VM is also suitable for use with dilators, whether or not these are part of a cancer recovery programme.

Ingredients

Water, Flax extract*, Aloe vera*, Locust bean gum*, Guar gum*, Sodium chloride, Xanthan gum, Potassium sorbate, Citric acid, Phenoxyethanol.

* Organically grown ingredients.

95% organic.

Protected by International Patents.

Storage: Replace cap when not in use. Store in a cool dry place between 5+30°C. Use before expiry date. Keep out of direct sunlight.

Caution: This device is not a contraceptive or a spermicide.

Warning: If the seal on any tube enclosed is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase. If irritation or discomfort occurs, discontinue use and seek medical advice. YES VM is not compatible with Polyurethane condoms.

Why certified organic?

When you buy something that is certified organic, not only are you making the best choice for your own wellbeing, your purchase is also supporting a system that respects human health, animals, wildlife and the environment. Certified organic products meet stringent standards and organic certification is your assurance that our ingredients and products have been grown and processed according to strict procedures. Production, processing, distribution and sales are monitored to maintain the finest organic and ecological integrity.

Packaging and recycling

YES aims to minimise the environmental impacts of all our packaging. So please do help us achieve that aim. All our bottles are MDPE. Polyethylene (MDPE) is the most widely accepted plastic by recycling centres. The cartons, boxes and package inserts can all be recycled.

100% Guarantee: YES products are 100% satisfaction guaranteed. Please contact us by phone or email if you have any concerns or questions about this guarantee.

Certified Organic by: The Soil Association, Bristol, UK.

Approved by: The Vegetarian Society.

Manufactured in Great Britain for

The YES YES Company Ltd.

The Timber Barn, Selborne Road, Greatham, Liss, Hampshire, GU33 6HG, United Kingdom.

YES logos are registered trademarks of YES Syzygy Ltd.

Contact us

UK Free Phone: 0-800-978-8525

UK local call rate: 03450 94 11 41

USA/Canada Toll Free: 1-888-777-0125

All other countries: +44 (0)1420 538 743

Website: www.yesyesyes.org

Email: hello@yesyesyes.org

See our full range overleaf.

Deutsch

Inhaltsstoffe

Wasser, Leinsamenextrakt*, Aloe Vera*, Johanniskernmehl*, Guar-Kernmehl*, Natriumchlorid, Xanthangummi, Kaliumsorbit, Zitronensäure, Phenoxyethanol.

*Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau.

95 %-ig biologisch.

Internationaler Patentschutz.

Aufbewahrung: Halten Sie es bei Nichtverwendung mit dem Deckel verschlossen. Bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort zwischen 5+30 °C auf. Verwenden Sie es vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

YEs VM ist erhältlich in Tuben mit 100 ml sowie Packs mit Einmalapplikatoren.

• Wenn es in den Wechseljahren zu einem Östrogenmangel kommt, kann die trockene Vaginalschleimhaut jucken, brennen oder gereizt sein. YES VM führt zu einer wirksamen, schnellen und langerhaltenden Linderung und sorgt für Wohlbefinden im Intimbereich.

Caution: Dieses Gerät ist keine Kondom- oder Spermizid-Zusatz.

Warning: Wenn das Seal auf dem Packungsaufkleber beschädigt oder geöffnet ist, verwenden Sie es nicht. Bei Auftreten von Reizungen oder Schmerzen nicht weiter verwenden und ärztlichen Rat einholen.

Attention: YES VM ist weder ein Spermizid noch ein Verhütungsmittel.

Warnung: Wenn das Sicherheitssiegel einer enthaltenen Tube beschädigt oder geöffnet ist, verwenden Sie es nicht. Bringen Sie es zurück, wo Sie es gekauft haben. Bei Auftreten von Reizungen oder Schmerzen nicht weiter verwenden und ärztlichen Rat einholen.

Autestudien: Es zeigt sich, dass YES VM eine schnelle und langerhaltende Wirkung erzielt werden kann und der Intimbereich sicher und natürlich mit Feuchtigkeit versorgt wird.

Warum biozertifiziert?

Durch den Kauf von biozertifizierten Produkten treffen Sie nicht nur die beste Wahl für Ihr eigenes Wohlbefinden, sondern Sie unterstützen ein System zur Schonung der menschlichen Gesundheit sowie der Tier- und Umwelt.

Biozertifizierte Produkte halten strenge Standards ein und eine Biozertifizierung gibt Ihnen die Sicherheit, dass unsere Inhaltsstoffe und Produkte nach strengen Vorgaben angebaut und verarbeitet wurden. Mit der Überwachung der Herstellung, Verarbeitung sowie des Vertriebs werden höchste biologische und ökologische Integrität gewährleistet.

Verschafft symptomatische Linderung bei:

• Vaginale Trockenheit

• Vaginale Alterung

• Juckreiz

• Reizung, Brennen und Empfindlichkeit

• Dyspareunie.

Eine vorübergehende vaginale Trockenheit kann verschiedene Ursachen haben: Geburt, Stillen, Einnahme der Pille. Auch bestimmte Antidepressiva und Antihistaminiaka sowie extremer Stress können zu einer Trockenheit im Intimbereich führen.

Autestudien:

• Sanftes, durchsichtiges, biologisches Haftgel

• Discret ohne Farb-, Geruchs- und Geschmacksstoffe, klebt nicht, keine Ausfällung. Entspricht der Konsistenz und dem Gefühl der Vaginalschleimhaut

• Richtiger pH-Wert zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des schützenden Säuregehalts im Intimbereich, unterstützt eine gesunde Vaginalflora

• Ohne Hormone

• Frei von bekannten schleimhautreizenden Stoffen und Inhaltsstoffen wie Glycerin, Erdölprodukt, Paraben (Hormon-Nahamer), die die Gesundheit der Intimflora stören oder gefährden können.

• Sanft und natürlich, auch bei hoher Empfindlichkeit geeignet

• Garantierte Reinheit mit zertifiziertem Bio-Status

• Kann zusammen mit Kondomen aus Naturlatex und Polyisopren verwendet werden

• Bewährt bei Gesundheitsexperten und Frauen zur wohltuenden, sicheren und angenehmen Linderung von unangenehmen Symptomen bei vaginaler Trockenheit in den Wechseljahren

• Eine hormonfreie, natürliche Alternative zu synthetischen und chemischen Feuchtigkeitsgels für den Intimbereich.

Nach einer Krebsbehandlung (Operation oder Chemotherapie) kann es zu vaginaler Trockenheit kommen. YES VM kann auch auf hormonsensitives Gewebe aufgetragen werden und versorgt empfindliches oder verletztes Intimgewebe mit Feuchtigkeit. YES VM kann im Rahmen einer eventuellen Krebsbehandlung auch mit einem Dilator eingesetzt werden.

XIFUVV3-08/2018

1051

CE

0088

SOIL ASSOCIATION
ORGANIC

APPROVED

THE ETHICAL
ORGANISATION

ETHICAL
AWARD

MADE
IN
BRITAIN

Français

Ingrédients

Veuillez lire cette notice attentivement avant l'utilisation.

YES VM

YES VM est un gel vaginal hydratant biologique à base d'eau qui a recours à une technologie brevetée pour une hydratation naturelle, longue durée des muqueuses vaginales sèches.

• Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Biologique à 95 %.

Protégé par des brevets internationaux.

Conservation: Remettez le capuchon en cas de non-utilisation. Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 5+30 °C. Utiliser avant la date de péremption. Protéger de la lumière solaire directe.

YES VM est offert en tubes de 100 ml et en boîtes de applicateurs pré-remplis.

• Lorsque la déplétion en œstrogènes due à la ménopause cause des démangeaisons, brûlures et irritations des muqueuses vaginales sèches, YES VM offre un soulagement efficace, rapide et longue durée et restaure le bien-être intime.

• YES VM utilise des polymères végétaux bio adhésifs qui adhèrent aux parois vaginales et procurent une hydratation prolongée pendant un maximum de 3 jours.

• Les études de cas indiquent que l'action de YES VM est rapide et de longue durée tout en restaurant l'hydratation intime de manière naturelle et en toute sécurité.

Pourquoi certifié biologique?

Lorsque vous achetez un produit certifié biologique, non seulement vous faites le meilleur choix pour votre santé, votre achat aide également un système qui respecte la santé humaine, les animaux, la vie sauvage et l'environnement. Les produits certifiés biologiques correspondent à des normes strictes et la certification biologique est votre garantie que nos ingrédients et produits ont été cultivés et traités conformément à des procédures strictes.

Procure un soulagement symptomatique en cas de:

• Sécheresse vaginale

• Atrophie vaginale

• Démangeaisons

• Irritation, brûlures et endolorissement

• Dyspareunie.

La sécheresse vaginale temporaire peut avoir diverses origines: suites d'un accouchement, allaitement et prise de contraceptifs oraux. Certains antidépresseurs et antihistaminiques peuvent causer une sécheresse intime, tout comme un stress extrême.

YES VM est:

• Gel doux, transparent bio adhésif

• Discret, inodore, incolore, sans saveur, n'adhère ni ne s'école. Texture et qualité de lubrification proches de la lubrification naturelle de la femme

• pH adapté pour restaurer et stabiliser l'acidité protectrice du climat intime, et promouvoir la santé vaginale

• Sans hormones

• Sans irritants muqueux connus, et sans ingrédients comme la glycérine, produits pétrochimiques, parabènes (hormones synthétiques) qui peuvent affecter ou compromettre la santé intime

• Garantie 100%: les produits YES sont garantis 100% de satisfaction. Veuillez nous contacter par téléphone ou courriel si vous avez des inquiétudes ou des questions sur cette garantie.

Garantie 100%: Les produits YES sont garantis 100% de satisfaction. Veuillez nous contacter par téléphone ou courriel si vous avez des inquiétudes ou des questions sur cette garantie.

Certifié biologique par: The Soil Association, Bristol, UK.

Aprobado por: The Vegetarian Society.

Fabricado en Gran Bretaña para

The YES YES Company Ltd.

The Timber Barn, Selborne Road, Greatham,

Liss, Hampshire, GU33 6HG, United Kingdom.

Los logos YES son una marca registrada de YES Syzygy Ltd.

Contacto:

R. U. gratuito: 0-800-978-8525

R. U. tarifa local: 03450 94 11 41

EE. UU./Canadá gratuito: 1-888-777-0125

Otros países: +44 (0)1420 538 743

Página web: www.yesyesyes.com

Correo electrónico: hello@yesyesyes.org

Ver al dorso nuestra gama completa.

Kontakt

Gebührenfreie Rufnummer

Dansk/Norsk/Svenska

Læs/Les denne brochure/bruksanvisningen omhyggeligt/nøye/noggrant inden brug/før bruk/innan användning.

YES VM

YES VM vandbaseret/vannbasert/vattenbaserad, økologisk fuktighedsgel/fuktighetsgel til skeden/skjeden/slidan, bruger/bruker en patenteret teknologi til at give/gi naturlig, langvarig fugt/fukt til tøre slimhinder/slimhinner/slemhinnor i skeden/slidan.

YES VM fås/säljs i tuber på 100 ml og pakker/pakker med forhåndsfylde applikatorer.

- Når nedsat østrogeniveau/østrogennivå i forbindelse med overgangsalderen/klimakteriet førasager/forårsaker/orsakar kløe/ klåd, svie/sveda og irritation af det tøre væv/vävnaderna i skeden/slidan, kan YES VM give/gi effektiv, hurtig, snabb och langvarig lindring och genopretter/genoppretter/återställer intima komfort.
- YES VM indeholder bio-klæbende/bioklebende polymere plantestoffer/växtdeler, der klæber/fester/faster til/vid skedens/skjedens/slidans vægge/vegger/väggar och giver langvarig hydriering/återfuktning i op/opp til tre dage.
- Casestudier viser, at YES VM er hurtigvirkende/snabverkande og langvarig, samtidig med at den intime fugt/fukt erstatter på sikert og naturligt vis.

Giver/Gir lindring af symptomer fra:

- Vaginal tørhed/tørhet/torrhet
- Vaginal atrofi
- Kløe/klåda
- Irritation/Irritasjon, svie/sveda og ømhed/ømhet
- Dyspareuni/smerte ved samleie/smärta vid samlag. Midlertidig/tillfällig tørhed/tørhet i skeden/skjeden/slidan kan skydes/bero på forskellige/olika ting, f.eks. fødsel, amning og indtagelse af/intaktfra orale svangerskabsforebyggende midler/prevensionsmidler/preventivmedel. Visse antidepresive midler og antihistaminer, samt ekstrem stress kan også forårsage/forårsake/orsaka intim tørhed/tørhet.

YES VM er:

- En blød/myk/mjuk, klar bio-klæbende/bioklebende gel
- Diskret ingen lugt/lukt, smag/smak, farve/färg, klistren/klébigheten/klibbigheten eller udflad/utflod/utflode. Minder/Minnet/Påminner om konsistensen og følelsen/känslan af en kvindes egen smering
- pH-afbalanceret/pH-balancert til genoprettelse/gjenopprettelse/återsättande og stabilisering af den beskyttende/skyddande surhedsgrad i de intime omgivelserne, der forbedrer hygienen/hygienen i skeden/skjeden/slidan
- Uden/Uten hormoner
- Uden/Uten velkendte/kjente slimhindeirritanter/slimhinneirritanter og ingredienser som glycerin, petroleum og parabener (hormoninhibitoren), der kan have en forstyrrende/negativ virkning/effekt på og kompromittere/kompromisse den intime hygiene/hyggiene
- Mild og naturlig, selv/även for de mest følsomme/känsliga omgivelser
- Garanterer renhed/renhet gennem/gjennom den certificerede/sertifiserte økologiske status
- Sikker brug/bruk/användning sammen med latex-og polyisoprenkondomer
- Anbefales/rekommenderas af sundhedsvesenet/ helsearbeidere/hälso- och sjukvårdspersonal og kvinder/kvinner til/för beroligende/lugnande og sikker lindring af invaliderende/handikappande symptomer fra tørhed/tørhet i forbundelse med overgangsalderen/klimakteriet

- Et naturligt alternativ uden hormoner i forhold til syntetiske, kemiske/kjemiske intimfugtighedsgerler/intime fuktighedsgerler: Hvis der er opstået/opstått tørhed/tørhet i skeden/skjeden/slidan efter cancerbehandling/kreftbehandling (kirurgi eller kemoterapi), er YES VM sikker at bruge/bruke i hormonfalsomme/hormonkänsliga omgivelser og kan fugte/fukte sarte/ömtåliga och traumatiserade/skadete intime væv/vävnader: YES VM kan også bruges/brukes sammen med dilatatorer, unset om disse er en del af et cancergenoptræningsprogram/ kreftrehabiliteringsprogram/cancerrehabiliteringsprogrammet eller ej/ikke.

Ingredienser

Vand/vann/vatten, hørekstrakt*/linekstrakt*, aloe vera*, johannesbrødgummi*, guar gummi*, natrumklorid, xanthangummi, kaliumsorbát, citronsyre/sítronsyre, phenoxyethanol.

* Økologiske ingredienser: 95% økologisk. Internationalt patentert/patentert.

Opbevaring/Oppbevaring/Förvaring: Sæt/sett hætten/korken på, når tuben ikke er i brug/bruk. Opbevarer/Oppbevarer/Förvaras kold/svært og tørt mellem +5-30 °C. Bruges/Brukes inden/innen/innan utdøbsdatoen/utløpsdatoen/sista förvaringsdatum. Holdes væk/vekk fra direkte sollys.

Forsigtig/Forsiktig: YES VM er ikke sæddræbende/sæddrependede/spermiedødende eller svangerskabsforebyggende/ett preventivmedel.

Advarsel/Varning: Hvis/Om forseglingen på tuben er beskadiget/skadet eller åbnet/åpnet, MÅ DU IKKE bruge/bruk den. Returner den til forhandleren/inköpsstället. Hvis der opstår/oppstår irritation/irritasjon eller ubehag, skal du stoppe brugen/bruka og søge/oppsoke lægehjælp/lege. IKKE kompatibel med polyuretanekondomer.

Hvorfor økologisk certificeret/sertifisert?

Når du køber/kjøper noget/noe, der er økologisk certificeret/sertifisert, foretager/gjør/gör ikke kun det bedste valg for dig selv, men med det køb/kjøp støtter du også et system, der respekterer menneskers sundhed/sunnehed/hälsa, dyr/djur, naturen og miljøet. Produkter, der er økologisk certificeret/sertifisert, oppfyller/oppfyller strengere standarder, og økologisk certificering/sertifisering er din garanti for, at vores/våre ingredienser og produkter er dyrket/odlaede og forarbejdet/behandlet/bearbejdede i henhold til/enligt strenge proceduren/prosedyren, produktion, forarbejdning/behandling/bearbeitning, distribution og salg overvæges/overväges/övervakas for at opretholde/opprettholde den bedste økologiske og miljømæssige integritet.

Emballage/Emballasje og genanvendelse/Resikulering/Återvinning

Her hos YES er det vores/vårt mål at minimerre de miljømæssige konsekvenser af al vores/vår emballage/emballasje. Så vi vil sætte pris på/ uppmakta, hvis/om du vil hjælpe/bruke os med at nå dette mål. Alle vores/våre flasker er af MDPE. Polyetylen (MDPE) er den mest accepterede/aksepterte plast på genbrugsstationer/gjenbrigningsstasjoner. Kartoner, asker/esker og emballageindsatsar kan alle genanvendes/resirkuleres/återvinna.

Garanti for 100% tilfredshed/nöjdhet: YES-produkter garanterer 100% tilfredshed/nöjdhet. Kontakt os/oss pr. telefon eller e-mail, hvis/om du har problemer eller spørsmål/spørsmål/frågor til/om denne garanti.

Økologisk certificeret/sertifisert af: The Soil Association, Bristol, UK.

Godkendt af/Godkjent av: The Vegetarian Society.

Produceret/Produsert i Storbritannien for

The YES YES Company Ltd.
The Timber Barn, Selborne Road, Greatham,
Liss, Hampshire, GU33 6HG, United Kingdom.
YES-logoenne er registrerede varemærker tilhørende
YES Syzygy Ltd.

Kontakt os

Gratis telefonnummer i Storbritannien: 0-800-978-8525

Lokalt telefonnummer i Storbritannien: 03450 94 11 41

Gratis telefonnummer i USA/Canada: 1-888-777-0125

Alle andre lande/land: +44 (0) 1420 538 743

Websted: www.yesyesyes.org

E-mail: hello@yesyesyes.org



Directions for use - YES VM in pre-filled Applicators

When you want to reach higher in the vagina, this product offers you a discreet and convenient way to deliver lubrication and moisture in the right amount to the source of discomfort.

Anwendung - YES VM im Einmalapplikator

Treten die Beschwerden tiefer in der Vagina auf, können Sie die unangenehme Stelle für eine natürliche Schleimhaut mit dem Applikator diskret und einfach mit der richtigen Menge mit Feuchtigkeit versorgen.

Instrukciones de uso - YES VM en aplicadores precargados

Si desea alcanzar una mayor profundidad vaginal, este producto ofrece una forma cómoda y discreta de obtener lubricación y humedad en la cantidad correcta en el propio origen de la incomodidad.

Brugsanvisninger - YES VM i forhåndsfyldte applikatorer

This product is a soft clear gel, easy to dispense and distribute, and designed for finger application, which allows you to decide how much you want to put where. Simply squeeze the soft gel on to your hand and use your finger tips to apply the desired amount to the vaginal tissues. YES VM may also be used to moisturise the labia. (No applicator included)

YES VM - frequency of use

A 5ml application used every 2-3 days, is typically sufficient to maintain a moist, comfortable vagina.

Provides intimate moisture for up to three days in typical cases of vaginal dryness.

Cases of severe dryness will benefit from more frequent use (1 application every 1-2 days) initially until improvement is gained.

If using to alleviate painful sex, apply as required before intercourse and to ensure comfort afterwards.

Iso-tonic[®], the iso-tonic/iso-osmotic nature of YES VM is carefully matched to human tissues.

Why is this balance important? Products which are hypertonic (often containing chemicals such as glycerine and glycols) can cause irritation to intimate tissues.

By being iso-tonic/iso-osmotic[®], YES VM protects against such irritation.

*For more information, see website

Anwendung - YES VM in der 100ml Tube

Das Produkt ist ein sanftes, durchsichtiges Gel, das mit dem Finger einfach aufgetragen und verteilt werden kann. Somit können Sie entscheiden, wie viel Sie wünschen möchten. Drücken Sie die gewünschte Menge aus der Tube und verteilen Sie das Gel mit den Fingerspitzen auf der Vaginalschleimhaut. YES VM kann auch zur Befeuchtung der Schamplatten verwendet werden. (Ohne Applikator)

Anwendungshäufigkeit - YES VM

Eine Anwendung von 5 ml alle 2-3 Tage ist in der Regel ausreichend, um die Intimflora feucht und angenehm zu halten.

Spendet in typischen Fällen von vaginaler Alterung bis zu drei Tage Feuchtigkeit. Bei starker Trockenheit kann das Gel anfangs häufiger (1 x alle 1-2 Tage aufrichten) verwendet werden, bis sich eine Besserung eingestellt.

Zur Erleichterung von schmerhaftem Geschlechtsverkehr und zur Linderung danach aufrichten. Iso-tonisch[®]: die isotonische/isoosmotische Eigenschaft von YES VM entspricht den menschlichen Geweben.

Warum ist dieses Geschlechtswerk wichtig? Hypertonische Produkte (die in der Regel Chemikalien wie Glycerin und Glykol enthalten) können im Intimbereich Reizungen verursachen.

Durch die isotonische/isoosmotische[®] Eigenschaft schützt YES VM vor Reizungen.

*Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Mode d'emploi - YES VM en tube de 100 ml

Ce produit est un gel mou transparent facile à distribuer et à étaler qui est pour être appliqué au doigt ce qui vous permet de décider de la quantité et de l'endroit où vous souhaitez l'étaler. Il suffit de mettre le gel mou sur votre main et d'utiliser le bout des doigts pour appliquer la quantité voulue sur les muqueuses vaginales. YES VM peut aussi être utilisé pour hydrater les lèvres de l'utérus. (Un applicateur n'est pas inclus)

Iso-tonic[®]: den isotonische/iso-osmotische sammensetzung af YES VM er omhyggeligt/omsorgsfullt afstørmt/tillsatt/ anpassad menseskligt væv/vevl/vänvärden.

Hvorfor er denne balancen/balanzen vigtigt/viktigt? Hypertoniske produkter (der ofte indeholder kemikalier som glycerin og glykoler) kan forårsage/forårsake/orsaka irritation af intime væv/vev/vänvärden.

Idet/Siden/eftersom YES VM er isotonisk/iso-osmotisk[®], beskytter/skyddar gelen mod sådan/slik irritation.

* Se flere oplysninger på vores/vårt websted.

YES WB

Is a water-based, personal lubricant. This luxurious silky gel is non-sticky, odour and taste free and feels like natural lubrication.

It is pH matched to vaginal pH to help protect against bacterial and yeast infections.

Compatible with natural rubber latex and polyisoprene condoms.

YES OB

Is a plant-oil based, longer-lasting Lubricant and intense hypoallergenic moisturiser and massage oil, which is soothing and richly emollient to nourish delicate intimate tissues. YES BUT is iso-tonic and pH balanced for anal sex. YES BUT is compatible with natural rubber latex, polyisoprene condoms.

YES VM (Vaginal Moisturiser)

Is a long-lasting natural vaginal moisturising gel perfect for regular/daily use. It is designed to revitalise and hydrate to relieve vaginal dryness and discomfort. YES BUT is compatible with natural rubber latex and polyisoprene condoms.

YES BUT

Is a water-based rich and natural and sensuous anal lubricant gel which moisturises and lubricates intimate tissues. YES BUT is iso-tonic and pH balanced for anal sex. YES BUT is compatible with natural rubber latex, polyisoprene condoms.

YES OB VANILLA

Is a luxurious plant-oil based natural lubricant and massage oil delicately infused with organic Madagascan Vanilla, whose rich oils and butters nourish and condition skin, giving lasting lubrication and comfort.

Etant sotonic/iso-osmotique[®], YES VM protège contre ces irritations.

*Pour un complément d'information, consulter le site Web

YES CLEANSE

Two natural intimate washes, one rose scented, one fragrance-free, which are sensitively formulated to respect the intimate ecology, with an effective and refreshing foam cleansing action. Each bottle contains over 200 applications.

YES DG (Double Glide)

This product enables a thrilling new dimension in love making, by layering water-based on top of oil-based to create a sublime and lasting glide. (YES DG comprises 1x 80ml tube of YES OB and 1x 100ml tube of YES WB).

YES INTRO


Is our easy way for you to try three different YES natural lubricants in three different formats, with a generous saving on price.

The YES range


Whether you use a little or a lot, for pleasure or for health, discover the full YES collection of natural and organic intimate products, in a range of sizes and variants to meet your differing needs.



YES OB

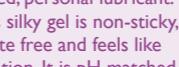

YES VM

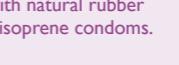

YES BUT




YES OB VANILLA



YES CLEANSE



YES DG (Double Glide)

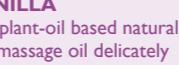

YES INTRO

